


型号QK-FHP-01

医用 X 射线立式摄片架防护装置

光感智能追踪 | 分级铅防护 | 高透铅玻璃 | 移动式落地支架 | 多重安全防护

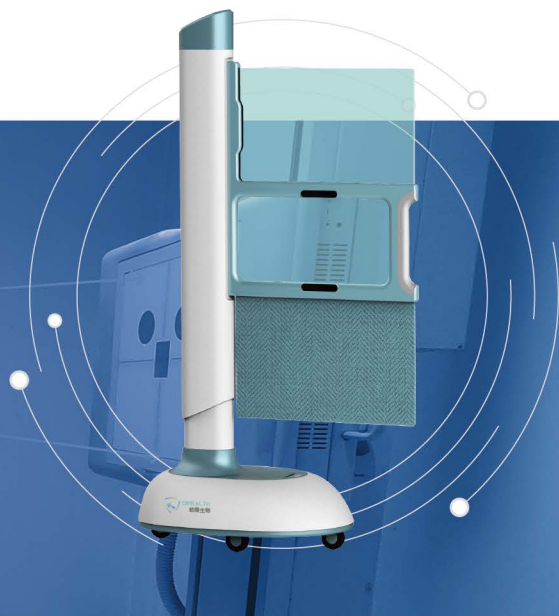

产品核心优势 >>>

全流程安全合规 多重安全防护

电气安全：符合 GB 9706.1-2020 医用电气通用安全标准，每年需检测漏电流，接地防电击

电磁兼容：满足 YY 9706.102-2021 EMC 标准，不受医院射频设备干扰，不影响 DR 成像

机械安全：符合 YY/T 0182-2023 机械防护规范，升降顺滑无卡顿，无夹手、倾倒风险

整机出厂全检：原材料进厂检验→装配自检→整机试运行→质检部出厂检测，层层把关

移动式落地支架 科室灵活适配

整机一体化落地支架，万向刹车轮设计，可自由移位适配不同 DR 设备机位；关机可将防护屏降至最低，降低重心，提升设备放置稳定性。

智能光感自动跟踪 解放医护双手

内置双路光线感应传感器，DR球管定位灯亮起自动识别，防护屏跟随射线范围自动升降；

支持三键遥控器手动上调 / 下调 / 切换跟踪模式，双重操控模式适配各类拍片体位

双层分级铅防护 辐射隔绝更安全

上下防护屏差异化铅当量配置，下方射线辐射更强区域加厚 1.0mmPb 铅层，全方位屏蔽散乱射线，降低医患累积辐射剂量，符合 YY/T 0182 医用辐射器具强制标准

高透铅玻璃 防护观察两不误

高透光铅玻璃视窗透光率 $\geq 80\%$ ，成像清晰无畸变，拍片过程无需挪开防护装置，兼顾辐射防护与临床观察需求

产品参数说明 >>>



铅当量防护

上防护屏 $\geq 0.50\text{mmPb}$ ，下防护屏 $\geq 1.0\text{mmPb}$ ，强效阻隔 X 散射线

可视透光设计

铅玻璃可见光透射率 $\geq 80\%$ ，拍片全程清晰观察患者状态，防护不挡视野

防护有效面积

上屏：宽 $\geq 52\text{cm}$ 、高 $\geq 28\text{cm}$ ；下屏：宽 $\geq 52\text{cm}$ 、高 $\geq 34\text{cm}$ ，覆盖全拍片区域

智能遥控操控

无线遥控有效距离 $\geq 3\text{m}$ ，远距离操控升降，无需近距离接触射线区

移动便捷稳定

底部万向轮带刹车，平地推动外力 $\leq 200\text{N}$ ，移动轻便，锁止稳固不倾倒

产品规格参数 >>>

• 产品寿命：5 年

• 包装清单：防护屏整机、使用说明书

• 主要安全特征：

按防电击类型分类：I 类

按防电击的程度分类：B 型应用部分

按对进液的防护程度分类：IPX0

按运行模式分类：连续运行

设备的额定电压和频率：220V ~，50Hz。

设备的输入功率：100VA

设备是否具有对除颤放电效应防护的应用部分：无

设备是否具有信号输出或输入部分：有

永久性安装设备或非永久性安装设备：非永久性安装设备

产品性能指标 >>>

铅当量等级：上防护屏不低于 0.50mmPb ，下防护屏不低于 1.0mmPb

可见光透色率：其透色率应不小于 80%

有效遥控距离不小于 3 m

电气安全：应符合 GB 9706.12020 的要求

电磁兼容：应符合 YY 9706.102-2021 的要求

售后保障 >>>

生产厂家：绍兴岐康生物科技有限公司

厂家地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道人民东路 1423 号办公楼一楼 101-8 室

咨询售后热线：028-87817603

服务承诺：收货 48 小时破损快速响应；整机 5 年使用周期

提供原厂维修、配件供应、技术指导